



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

의료용 바디 밸런스 케어 테이프

192


특징

- ① 높은 점착력
- ② 유연한 소재
- ③ 특수구조 점착제로 습기를 통과 시킵니다.

용도

의료용 바디 밸런스 케어 테이프

구조

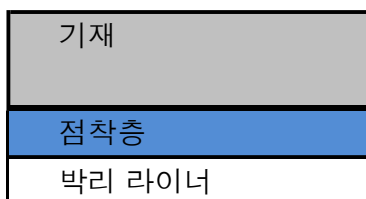

특성

1. 기본특성

제품명	점착력 (N/25mm)
192	19

2. 사용방법

- 1) 접합하는 재료 면에 먼지나 이물 및 기름의 오염이나 수분을 제거 합니다.
- 2) 테이프를 푸실 때는 손가락의 압력으로 피착체에 접합 합니다.
- 3) 롤 등으로 충분히 압착 후 세퍼레이터를 분리합니다.
- 4) 접합하는 피착체를 중합하여 균일하게 압착하면 강력한 점착강도를 얻을 수 있습니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地

2013年7月 発行